



مطابق استاندارد بین المللی

ICC-Standard no. 116
ICC-Standard no. 118
ISO 5529

Sedimat

آسیاب مخصوص آزمون رسوب زلنی



Brabender®


آزمون رسوب زلنی:

با دستگاه سدیمات و شیکر تجهیزات کامل جهت آزمون رسوب زلنی (استاندارد CC به شماره ۱۱۶ و ۱۱۸ و استاندارد ISO به شماره ۵۵۲۹) در اختیار شماست و می‌توانید به نتایج تکرار پذیر آن اطمینان داشته باشید.

آزمون رسوب زلنی کمیت و کیفیت اجزای گلوتن آرد را به خوبی نشان می‌دهد. این آزمون میزان تورم اجزای گلوتن آرد معلق در یک محلول اسید لاکتیک را اندازه گیری می‌کند. حجم رسوب تعیین شده بر حسب میلی لیتر پس از یک فاصله زمانی استاندارد داده های ارزشمندی را در خصوص خواص مورد انتظار خمیر، ظرفیت نگهداری گاز، مقاومت خمیر و حجم محصول نهایی ارائه می‌دهد. بر اساس میزان زلنی می‌توان پیش بینی های قابل اعتمادی در رابطه با خواص پخت آرد به دست آورد.

Shaker	
1x 230 V; 50/60 Hz + N + PE; 0.2 A	اتصالات اصلی
660 x 370 x 430 mm	ابعاد
۱۰ کیلوگرم	وزن خالص

Sedimat	
تقریباً ۱۰۰ گرم گندم در ۳ دقیقه	ظرفیت
380 x 620 x 610 mm	ابعاد
۵۰ کیلوگرم	وزن خالص
3x 230 V; 50/60 Hz + PE; 2.0 A 3x 400 V; 50/60 Hz + N + PE; 1.1 A	اتصالات اصلی

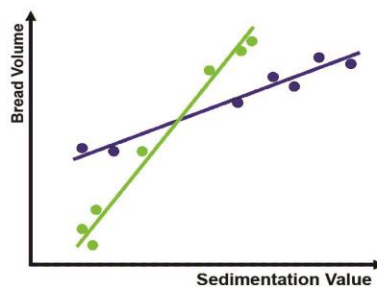

A Wheat: 420 + 3 x Sedi + 10 x Protein = Bread volume
B Wheat: 306 + 3 x Sedi + 17 x Protein = Bread volume

خصوصیات آسیاب سدیمات:

آسیاب سدیمات توسط کمپانی Brabender به منظور آماده سازی دانه های غلات برای آزمایش رسوب زلنی طراحی شده است. کارکرد بسیار آسان آسیاب دستیابی به نتایج ثابت و قابل اطمینان با استفاده از آسیاب و الک تمام اتوماتیک و به دست آوردن آرد کاملاً مطابق با بازدهی مورد نیاز، مقدار خاکستر و درجه نرمی مناسب برای آزمون رسوب زلنی، از خصوصیات دستگاه می باشد. غلتک های سدیمات از استیل با کیفیت بالا تهیه شده و کاملاً سخت و محکم می باشند. تحت شرایط عادی عملکرد، هیچ گونه تغییر در نتایج فرایند آسیاب به دلیل فرسودگی غلتک ها وجود ندارد. الک مدور پوشیده شده با نایلون ۱۵۰ میکرون در محل جمع آوری آرد قرار دارد. این امر مانع از آسیاب آلودگی های آرد همراه با باقی مانده آرد قبلی می شود.



تجهیزات جانبی آزمون زلنی:

- Shaker -
- Automatic dosing -
- Shaking cylinder -

آرد آماده شده را در شیکر با محلولهای مشخص و با ریتم تعریف شده مخلوط کرده و در شیکینگ سیلندر قرار دهید. دستگاه شیکر با چهار آلامر زمان های لازم برای ثبات و رسوب را تعیین می کند.

مواد شیمیایی آزمون زلنی
ایزوپروپیل الکل (۹۹-۱۰۰٪)
لاکتیک اسید
محلول آبی بروموفنل

شرکت پاک فن نماینده انحصاری کمپانی Brabender در ایران

© | ۸۸۶۷۶۸۳۹ - ۸۸۶۷۶۸۴۰ - ۸۸۷۸۲۷۱۵ (۰۲۱) |
www.pak-fan.com | info@pak-fan.com |

تهران - میدان ونک - خیابان گاندی شمالی - خیابان شهید منافی غربی - شماره ۴۴ - طبقه سوم